




Axónico

Manual de Uso

**Configuración de
Escáneres**


1- Instalar el programa **EZTwain**

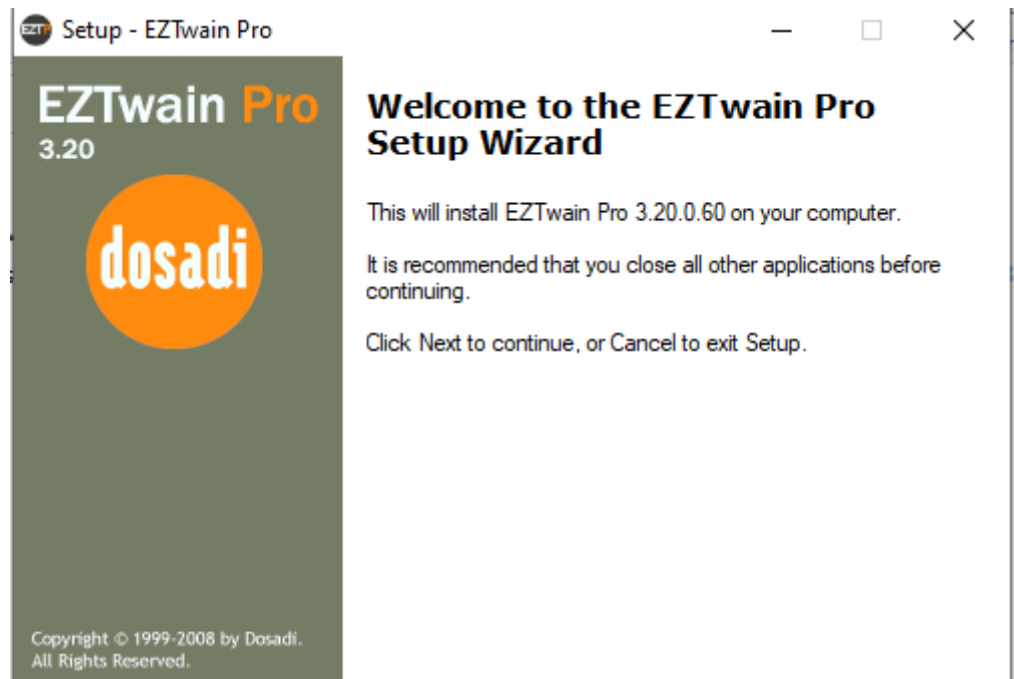

2- Luego copiar los siguientes archivos que se encontrarán dónde se instaló EZTwain en C:\QTECH\axonico:

- EZCurl.dll
- EZDcx.dll
- EZGif.dll
- EZJpeg.dll
- EZOcr.dll
- EZPdf.dll
- EZPng.dll
- EZSymbol.dll
- EZTiff.dll
- Eztwain3.dll

3- Y por último verificar que el sistema Axónico reconozca el escáner

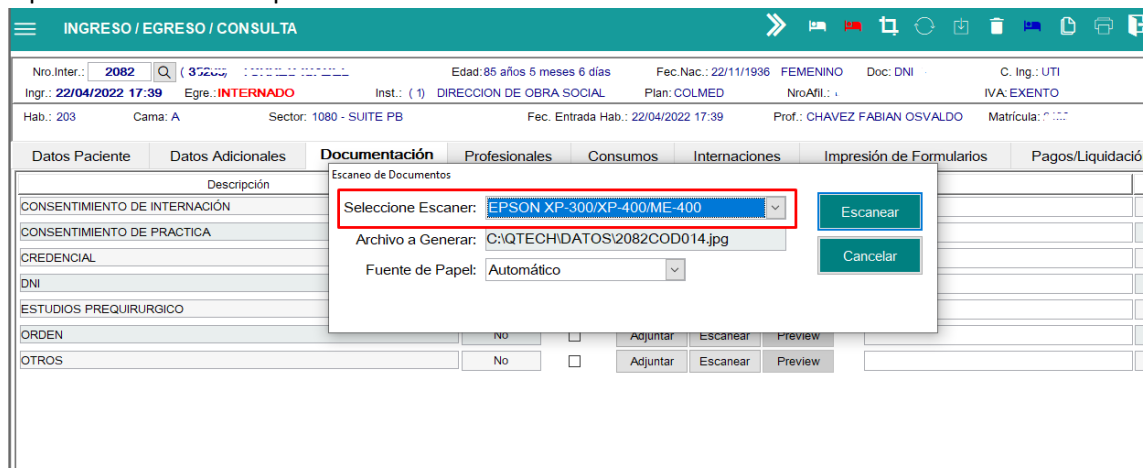

Nota: Para los escáneres Kodak el instructivo se encuentra en el siguiente link:

<https://axonico.ar/manuales/nuevos/Configuracion%20de%20scanner%20KODAK.pdf>